



L'examen de la scène de crime sans limites

-----Applications-----

- Scène de crime
- Laboratoire forensique

Recherche, détection et imagerie:

Résidus de tir	Sang	Empreintes digitales
Accéléranants	ADN	Fluides corporels
Bleus	Dents et os	Traces de semelles
Cheveux et fibres	Et plus	

-----Fonctionnalités-----

- Blanc 400-700 nm
- Ultraviolet 350-380 nm
- Violet 395-425 nm
- Bleu 420-470 nm
- Bleu/Vert 445-510 nm
- Vert 480-560 nm
- Orange 570-610 nm
- Rouge 600-660 nm
- Infrarouge 800-900 nm

1 source lumineuse, 10 LED, 175 longueurs d'onde

La Crime-lite® X comprend des LED en blanc, ultraviolet, violet, bleu, bleu/vert, vert, orange, rouge et en infrarouge.

Crime-lite® X









La Crime-lite® X constitue un kit ALS complet sous la forme d'une seule source lumineuse.

Elle permet à l'examineur de basculer aisément entre les LED en blanc, en ultraviolet, en violet, en bleu, en bleu/vert, en vert, en orange, en rouge et en infrarouge, pour effectuer l'examen multispectral complet d'un lieu de crime.

Actionnée via une interface simple à 3 boutons, la Crime-lite® X offre de nouvelles fonctionnalités inédites pour une source lumineuse et permet aux examinateurs de laboratoire et de la police scientifique de révéler le nombre maximal d'éléments de preuve de chaque examen.

1 source lumineuse, 175 bandes de longueurs d'onde de lumière La Crime-lite® X unique est un kit ALS (sources lumineuses alternatives) complet constituant une seule source lumineuse.



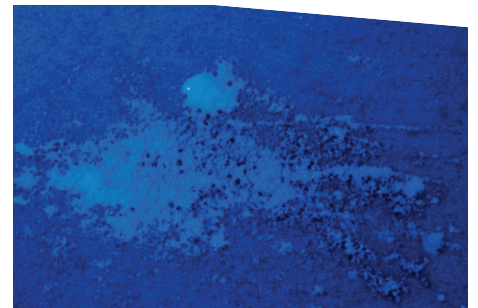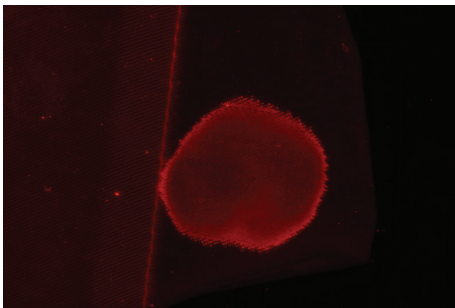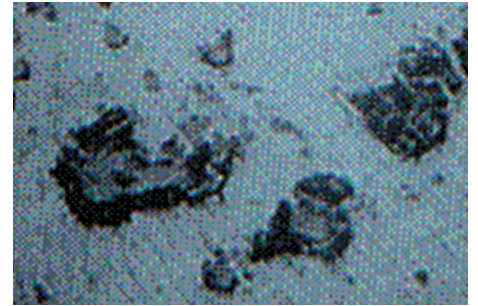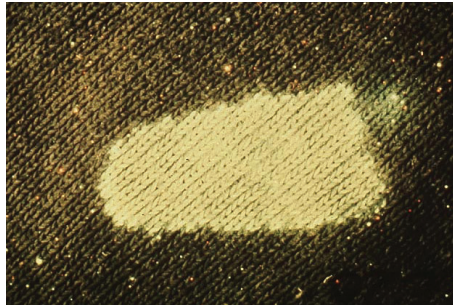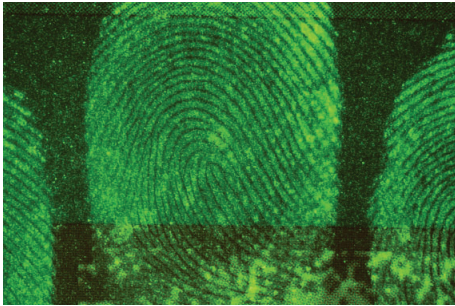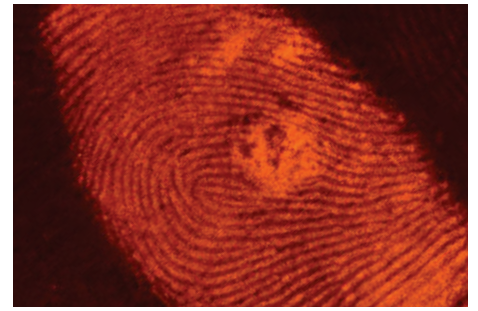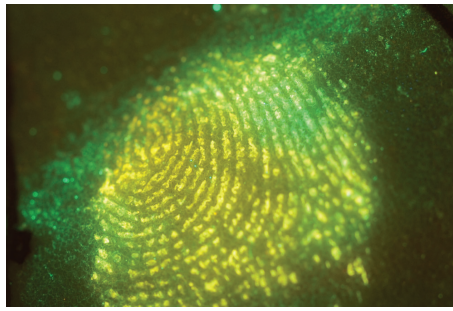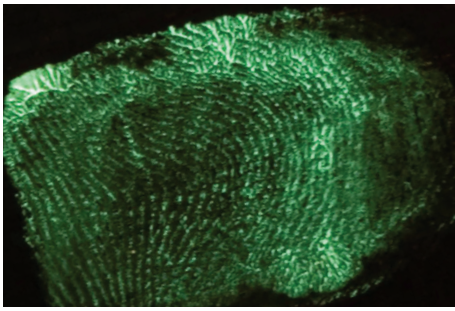

Crime-lite® X

Combinez 3 LED au choix pour multiplier la puissance de sortie et générer 175 combinaisons de longueurs d'onde afin d'optimiser l'éclairage, quel que soit le type d'éléments de preuve.

Kit de recherche en sérologie

También ofrecemos un kit especialmente Nous offrons également un kit spécifiquement conçu pour la sérologie médico-légale, qui comporte une source lumineuse à 5 bandes passantes permettant de détecter et d'examiner les fluides corporels. Ce kit est assorti d'autres accessoires.

Fonctionnalités intégrées

Prenez entièrement en main les fonctions de la Crime-lite® X et surveillez les performances de la source lumineuse via l'écran LCD intégré.

Connectez-vous

Utilisez l'application dédiée sur téléphone portable pour Crime-lite® X pour utiliser et surveiller une seule source lumineuse ou regrouper de nombreuses unités pour diverses applications.

