



Système modulaire d'imagerie d'empreintes

-----Applications-----

- Laboratoire forensique

Visualisation et enregistrement de traces papillaires latentes, avérées ou traitées:

DISCOVER

Imagerie de fluorescence multi-spectrale

UV	IR	
Contraste	Coaxial	Oblique
Surfaces cylindriques		Lumière polarisée

-----Matériel-----

Système de laboratoire

Cœur

- Réceptacle (dock) rapide pour CrimeLite AUTO
- Positionnement en XYZ
- Interface avec écran, souris et clavier

Modules d'imagerie et d'éclairage :

- CSU pour imagerie sur surfaces 3D cylindriques
- Eclairage coaxial
- Lumière polarisée
- Plaque de diffusion de la lumière

-----Fonctionnalités-----

- Transition immédiate entre la scène de crime et le labo
- Examens en modes visible, fluorescent, contraste, UV et IR


DISCOVER for Crime-lite® AUTO

Maximisez la recherche, la détection et l'imagerie des traces sur scène de crime ET au laboratoire

En combinant le CrimeLite AUTO portable avec un réceptacle modulaire de laboratoire, DISCOVER constitue une station de travail en 2 parties pour toutes les étapes de recherche de traces en forensique.



Utilisé seul, le CrimeLite AUTO est un outil puissant et complet de recherche multi-spectrale et d'enregistrement de traces sur scène de crime.

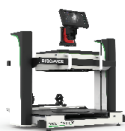

En version « dock », la station de travail DISCOVER ajoute de l'imagerie spécifique et des modules d'éclairage pour photographier les empreintes digitales.

DISCOVER bénéficie du caractère intuitif du CrimeLite AUTO et l'applique à l'imagerie des empreintes en laboratoire.





L'examen de la scène de crime sans limites

-----Applications-----

- Scène de crime
- Laboratoire forensique

Recherche, détection et imagerie:

Résidus de tir	Sang	Empreintes digitales
Accélérateurs	ADN	Fluides corporels
Bleus	Dents et os	Traces de semelles
Cheveux et fibres	Et plus	

-----Matériel -----

- Appareil photo 20MPx
- Imagerie UV-VIS-NIR
- 55 plages possibles d'éclairage
- Sélection automatique des filtres de contraste
- Fonction auto-focus
- Ecran tactile
- Interface conviviale

-----Fonctionnalités -----

- Un outil de recherche forensique compact et complet
- Examens en temps réel dans le visible, l'UV et l'IR, en fluorescence
- Recherche de traces au-delà du spectre visible
- Option : système de laboratoire

Crime-lite® AUTO

La solution actuelle la plus complète et la plus compacte pour l'imagerie numérique en forensique

En combinant les dernières technologies d'imagerie en forensique avec des éclairages multi-spectraux puissants, le nouveau CrimeLite AUTO est la solution complète pour la recherche, la détection et l'enregistrement des traces.

Le CrimeLite AUTO portable intègre une caméra haute résolution de 20 MPx, des éclairages à LED sur tout le spectre utile et un choix intelligent et automatique des filtres de contraste pour révéler rapidement une large gamme de traces.

La technologie moderne d'imagerie en forensique se combine à l'éclairage multi-spectral puissant pour une solution complète de recherche et d'enregistrement des traces.

