



## VSC 80

Poste de travail QDE compact : c'est une solution complète d'examen criminalistique des documents contestés en laboratoire.

Un instrument idéal pour l'analyse et la comparaison de l'écriture manuscrite, des signatures, des documents photocopiés et imprimés, des billets de banque, des chèques et des documents sécurisés, notamment les passeports, les cartes d'identité, les permis de conduire et les documents sources. Le VSC® 80/FS offre un ensemble complet de fonctions d'examen dans un poste de travail compact, mais puissant.

Tecnología de nivel forense de operación simple

Estación de trabajo con pantalla táctil inteligente para análisis de nivel forense de documentos de viaje y de identidad.

-----Applications-----


- Documents de voyage et d'identité
- Documents manuscrits et imprimés
- Billets de banque et chèques
- Les objets de valeur.



Quels sont les documents généralement examinés ?

Passeports	Visas	Billets
Documents de l'éleveur	Permis	
Œuvres d'art	Billets de loterie	
Documents d'identité	Et plus ....	

-----Fonctionnalités-----

- Appareil photo haute sensibilité, spectres Visible-IR
- Sortie vidéo en direct Full HD
- Imagerie claire et nette, grossissement jusqu'à x100
- Examen multispectral UV/Visible/IR
- Examens automatiques
- Base lumineuse de transmission amovible
- Champ de vision étendu

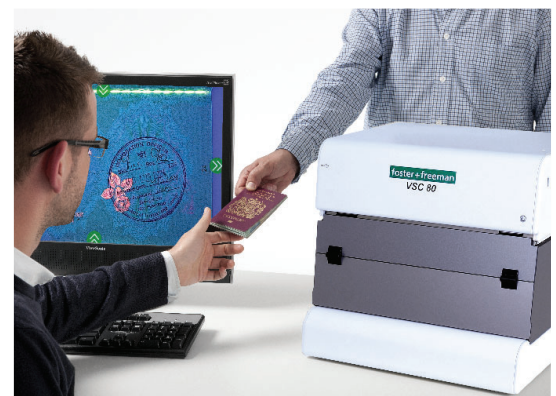

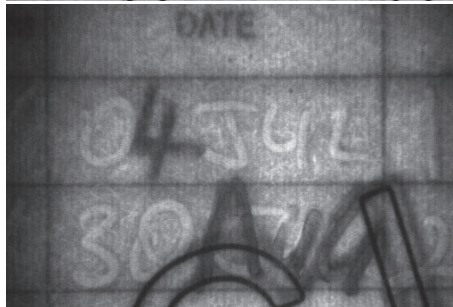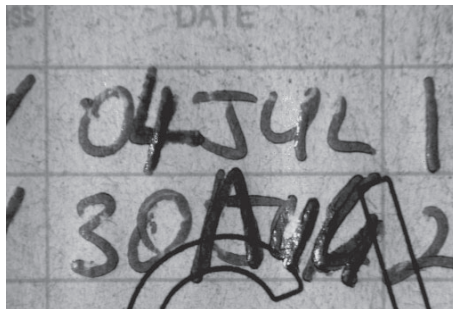

### Imagerie multispectrale de documents

Introduit pour la première fois par foster+freeman il y a presque 40 ans, l'examen de documents par imagerie multispectrale UV-Visible-IR exploite les propriétés fluorescentes et réfléchissantes des papiers et des encres pour révéler des ajouts, des altérations ou des ratures impossibles à détecter dans le spectre visible,

### Décoder les données masquées

Les décodeurs de données embarqués peuvent détecter et lire les codes barres 1D et 2D, les données MRZ codées par l'OACI, les IPI (Invisible Personal Information, Informations Personnelles Invisibles) et les ICI (Invisible Constant Images, Images Constantes Invisibles) intégrées dans les passeports et les cartes d'identité.

### Visualiser et authentifier

Le VSC@80 comprend des modes d'éclairage adaptés à la visualisation de tous les éléments fluorescents courants sous UV ainsi que des éléments de sécurité de troisième niveau tels que l'encre infrarouge anti-Stokes.



## La Solution QDE polyvalente

Le VSC@80/FS est un système d'imagerie multispectrale compact et sans compromis qui a été conçu pour répondre aux diverses exigences de tous les examinateurs de documents, notamment les examinateurs travaillant en laboratoire, impliqués dans des enquêtes criminelles/légales, les agents chargés de la sécurité aux frontières et de l'immigration qui traitent un grand nombre de documents de voyage et d'identité, ainsi que ceux qui sont impliqués dans le développement et la fabrication de documents sécurisés, de billets de banque et d'éléments de sécurité de document.